



Startgids

Medido demo Medicijnklok firmware




1

Aan de slag met de demo Medicijn klok

Geef je binnenkort een training voor de Medido Medicijn klok? Daar hebben wij een speciale Medido demo Medicijn klok voor gemaakt. Je hoeft nu niet in te loggen in het portaal om te laten zien hoe de Medido Medicijn klok werkt. Er zit namelijk een standaard programma in dat je moet volgen. In deze guide leggen we precies uit hoe de demo Medicijn klok werkt.

Op de doos van de Medido demo Medicijn klok staat een sticker met 'DEMO' erop. Zie je dit? Dan heb je een juiste Medicijn klok te pakken. Het is belangrijk dat je eerst de demo Medicijn klok test voordat je een training geeft.

Om de demo Medicijn klok te gebruiken volg je het stappenplan dat beschreven is in deze startgids. Het is belangrijk dat je deze volgorde aanhoudt omdat de demo is geprogrammeerd met een vaste volgorde.

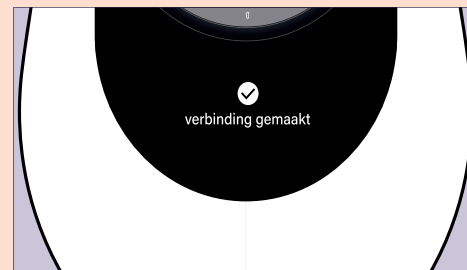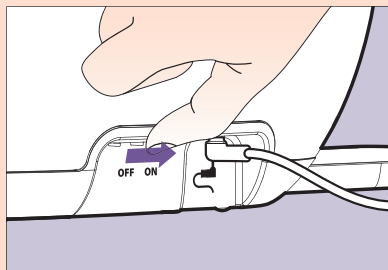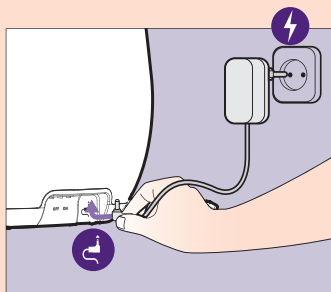

Als je de demo Medicijn klok aanzet lijkt het alsof de Medicijn klok verbinding maakt. Dit is NIET zo. De demo Medicijn klok is namelijk niet gekoppeld aan ons portaal.


Nadat je de demo Medicijn klok hebt aangezet en het tijdstip op de klok correct is, kun je de medicijnrol laden.



Let op. Lees de handleiding zorgvuldig voor het starten met de Medido demo Medicijn klok. Er zit geen medicijnrol in de Medido Medicijn klok, vergeet deze niet mee te nemen.

2

Stil medicatie signaal

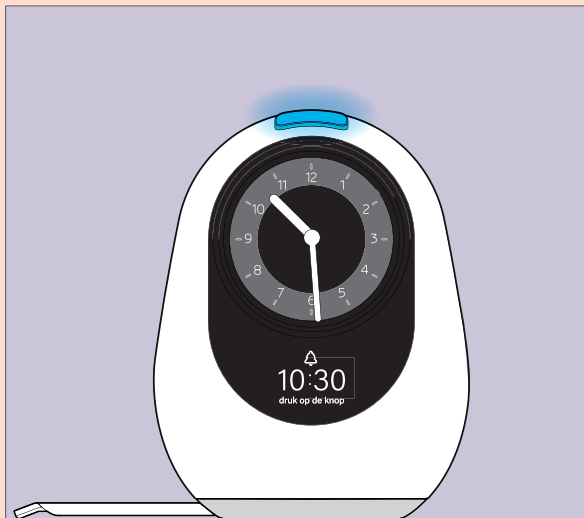

De demo Medicijnklok staat in **neutrale stand**. Nu kun je de zachte medicatie attentie triggeren:

Houd de knop **5 seconden** ingedrukt. Tel zelf mee. Na 5 seconden hoor je een zachte attentie. De knop licht **NIET** op. Nu start de medicatie attentie direct. De knop en de klok worden nu langzaam blauw.



De zachte medicatie attentie van de demo Medicijnklok duurt **1-2 minuten**. Na 1-2 minuten klinkt er een geluidssignaal.

Druk op de knop voor de uitgifte.

3

Moment opvragen



Het is mogelijk om te zien hoe laat de medicatie-momenten staan gepland.

Gebruik hiervoor de knop bovenop de Medido Medicijnklok. Bij het **herhaaldelijk indrukken** van de knop verschijnen de geplande momenten 1 voor 1 op het display.



Je kunt tijdens de training ook laten zien hoe een **vooruitgifte** werkt. Druk hiervoor 5 seconden op de knop, totdat de knop groen kleurt. De medicatie wordt uitgegeven.



4

Het programma



De demo Medicijnklok heeft een standaard volgorde, dit is zo geprogrammeerd. Het is belangrijk dat je dit programma volgt.

Doorloop altijd eerst de stappen voordat je de daadwerkelijke training geeft om alles te testen. Zo voorkom je dat je tijdens de training tegen moeilijkheden aanloopt.

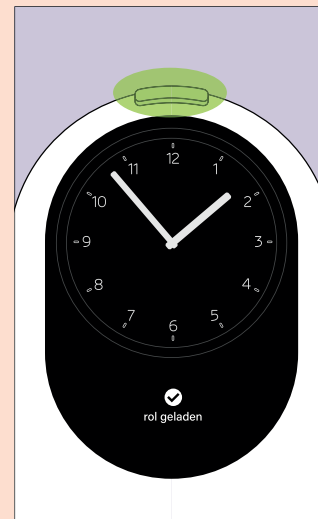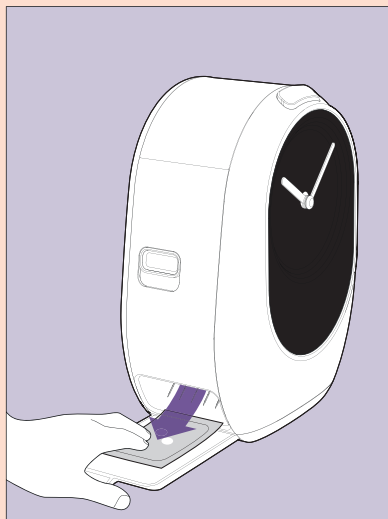

Het programma is als volgt ingericht:

- 1.** Zet de demo Medicijnklok aan;
- 2.** De zachte medicatie attentie;
- 3.** Het medicatieschema laten zien, het schema:
 - a. 8:00 uur;
 - b. 12:00 uur;
 - c. 22:00 uur;
- 4.** Een vooruitgifte (dit is altijd het medicatiemoment van 22:00 uur).



Klantenservice: 085 888 5123



www.medido.com